

# Traitement de l'Incontinence Urinaire

## UI CUBE



### Contre indications

- Non autorisé pour les patients ayant des implants métalliques (partie basse du corps)
- Patientes avec DCI (dispositif contraceptif intra-utérin)
- Patients atteints d'une maladie (maladie cardiaque, cancer, diabète, etc.)
- Patientes enceintes ou ayant accouché récemment.
- Patients ayant subi une intervention chirurgicale récemment.
  
- Avant tout démarrage de l'appareil, retirez les éléments métalliques comme les clés, les portefeuilles, etc.

### SPECIFICATIONS TECHNIQUES



Spectre	Electromagnetique
Puissance d'entrée	220~240 V~, 50/60Hz
Consommation énergie	1,350 VA
Intensité du champ magnétique	2.5T
Dimensions	396 (L)X415 (l) X 415.5 (H )mm
Poids	24Kg



2 rue du Cabotage - ZI du Ty Mor 56700 Hennebont - FRANCE  
contact@medical-service.net - commercial@medical-service.net  
Tél. : +33(0)2 97 89 99 99




Découvrez l'**efficacité** de la **stimulation**  
**électromagnétique focalisée de haute intensité**  
(HIFEM)



# UI CUBE

Dispositif médical, UI CUBE a été conçu spécifiquement pour aider à la rééducation des muscles pelviens faibles ainsi qu'à la restauration du contrôle neuromusculaire. Par conséquent, ce dispositif de traitement **NON INVASIF** est adapté à tous les types d'incontinence et particulièrement au traitement de l'incontinence d'effort. La stimulation électromagnétique puissante pénètre profondément et permet de renforcer l'ensemble des muscles du plancher pelvien.

## Stimulation en profondeur & renforcement des muscles du plancher pelvien

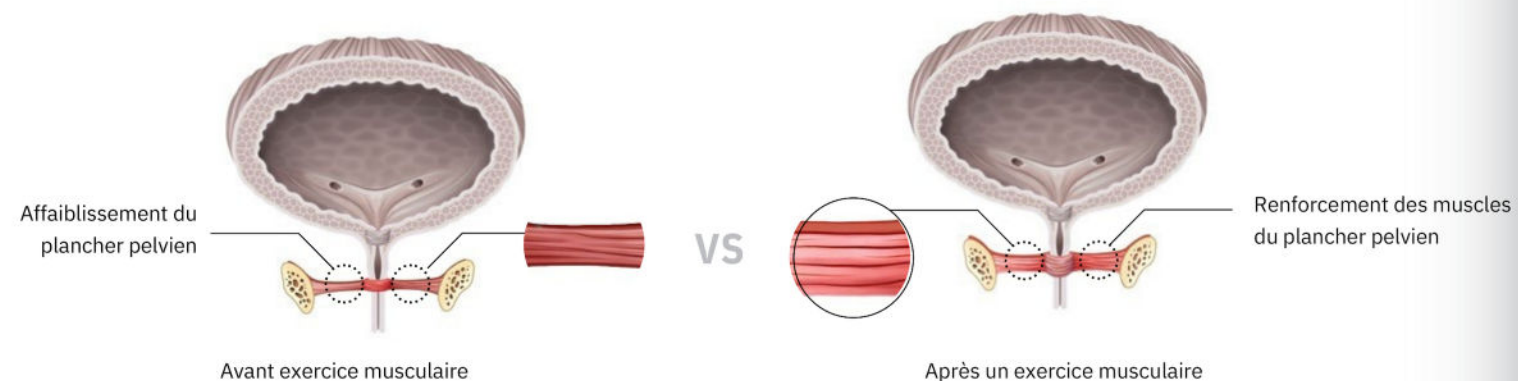

## Avantages pour le patient



**Pas d'anesthésie**



**Pas de déshabillage**



**Non invasif**





**Aucune insertion**



## L'exercice de Kegel maximisé

Le modification rapide de l'intensité du champ magnétique produit par UI CUBE induit un courant électrique au niveau cellulaire. Ce courant provoque un potentiel d'action qui entraîne une contraction musculaire supra maximale. Cette contraction à la fois répétée & plus intense des muscles du plancher pelvien est réalisée sans douleur ni effet secondaire.

Dans le cadre du protocole UI CUBE, la contraction musculaire s'effectue environ 1800 fois en 10 minutes. Le traitement pendant 30 minutes permet d'obtenir l'effet de 12 000 exercices de Kegel et améliore la force musculaire volontaire.

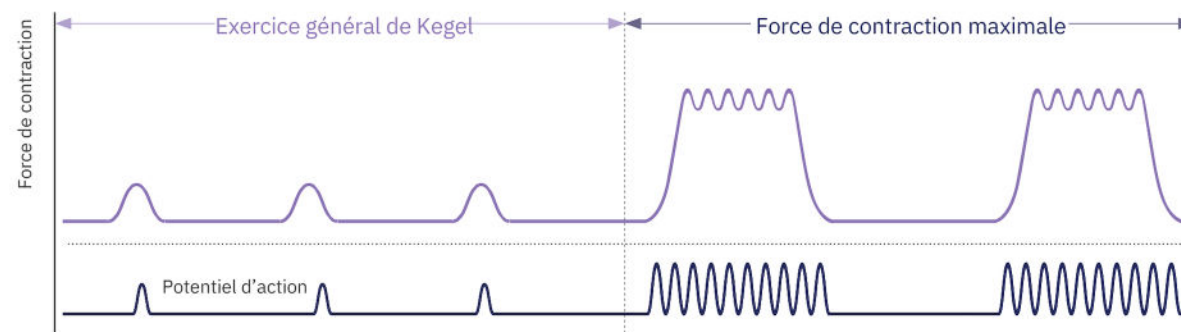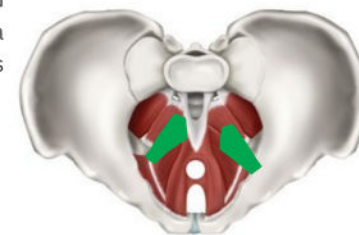

## UI CUBE également dédié à d'autres applications cliniques

- Prostatite
  - HBP (Hyperplasie Bénigne de la Prostate)
- Troubles de l'orgasme, de l'érection
- Douleur pelvienne chronique



## Une mise en application rapide et simple pour des traitements efficaces



- ① Champ magnétique puissant  
Jusqu'à 2.5 Tesla afin de traiter efficacement l'UI
- ② Simple d'utilisation  
Rapidité d'exécution via des étapes simples pour passer du mode 1 au mode 2
- ③ Guidage vocal convivial  
Notification aisée des conditions d'utilisation, du fonctionnement à l'avertissement de détection de danger
- ④ Design et assise ergonomiques